


أغطية التبخير من البولي بروبيلين الخالية من الأنايب

توفر أغطية التبخير من البولي بروبيلين الخالية من الأنايب التي تنتجها Topair بيئة عمل واقية مثلى للعاملين في المعامل الذين يتعاملون مع الأحماض والمواد الكيميائية القاسية.

تقوم شركات عالمية رائدة بتصنيع المكونات الكهربائية والميكانيكية مثل شركة EBM في ألمانيا وشركة AAF في الولايات المتحدة. وتلتزم المنتجات بالمعايير الدولية ذات الصلة.

يتم تخصيص أغطية التبخير من البولي بروبيلين الخالية من الأنايب التي تنتجها Topair حسب متطلبات كل عميل.

- هيكل من البولي بروبيلين الأبيض الملحوم
- سطح عمل من البولي بروبيلين مانع للتسرب ومدمج
- جدار خلفي يسهل تفكيكه
- نافذة أمامية منزلقة من الزجاج المقسي
- شاشة تشير إلى وقت العمل الإجمالي للمروحة، لأغراض التتبع واستبدال المرشحات
- مروحة فائقة الجودة لا تصدر أي ضوضاء صنعتها شركة EBM الألمانية
- إضاءة 600-800 LUX LED صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديًا منفصلة عن فتحة التبخير.
- سرعة التدوير 0.1+0.6 م/ث، ±120 قدم في الدقيقة
- استبدال سهل للمرشح
- وحدة ترشيح علوية تشتمل على مرشح كربون
- نظام تحكم رقمي سهل الاستخدام بما في ذلك التحكم في سرعة المروحة وشاشات عرض ضغط الهواء وضوء الإشارة ووقت التشغيل والتنبهات.

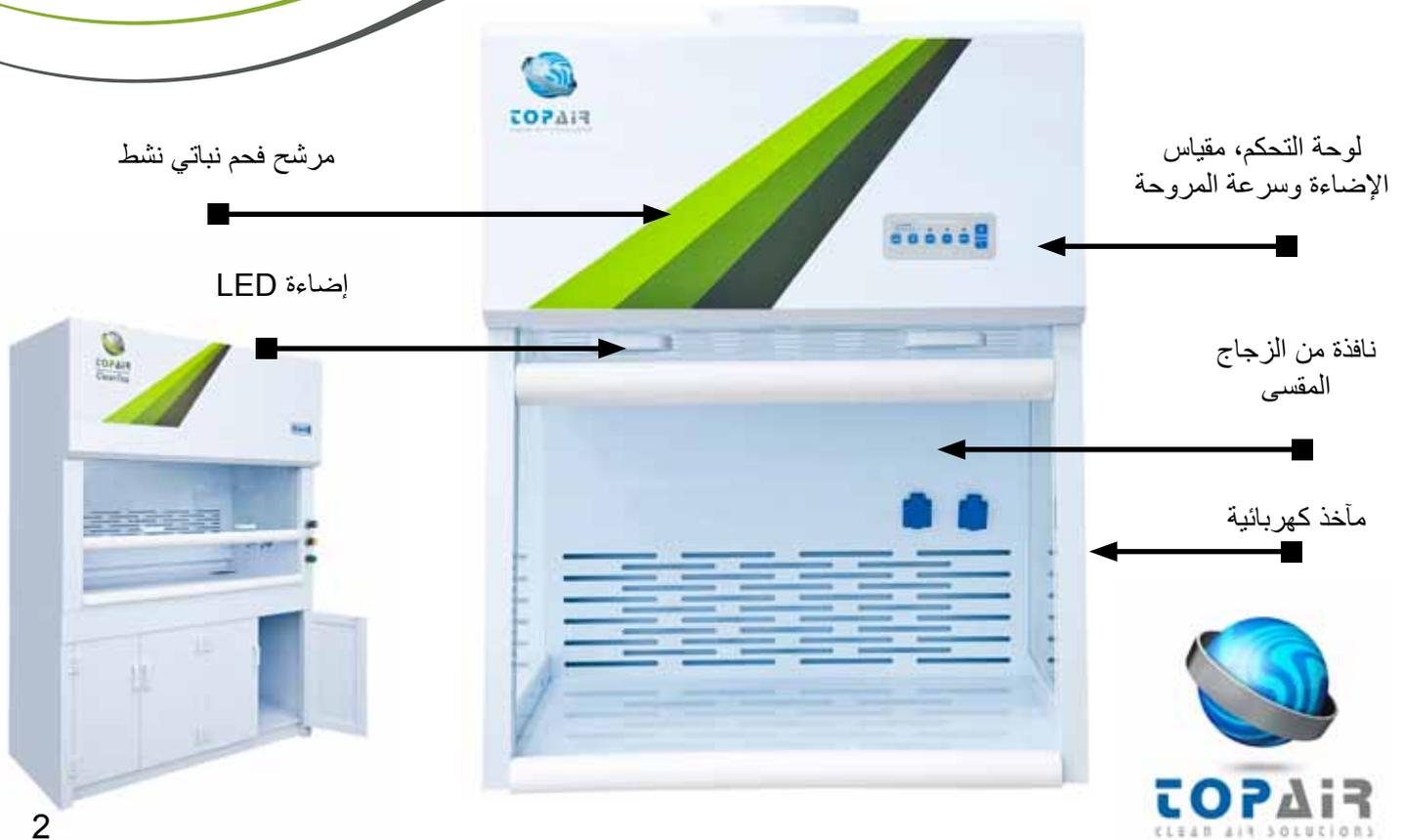

الطرازات

CF-180-A-PP	CF-160-A-PP	CF-120-A-PP	CF-090-A-PP	CF-060-A-PP	المواصفات/ الطراز
1800 x 700 x 1050 مم	1600 x 700 x 1050 مم	1200 x 700 x 1050 مم	900 x 700 x 1050 مم	600 x 700 x 1050 مم	الأبعاد
70.67 x 27.5 x 41.3 بوصة	62.99 x 27.5 x 41.3 بوصة	47.24 x 27.5 x 41.3 بوصة	35.4 x 27.5 x 41.3 بوصة	23.62 x 27.5 x 41.3 بوصة	الخارجية
					العرض x العمق x الارتفاع
640 x 660 1740 مم	640 x 660 1540 مم	1140 x 640 x 660 مم	840 x 640 x 660 مم	540 x 640 x 660 مم	مساحة العمل
66.50 x 25.2 x 26 بوصة	60.63 x 25.2 x 26 بوصة	44.88 x 25.2 x 26.3 بوصة	33.07 x 25.2 x 26.3 بوصة	21.26 x 25.2 x 26.3 بوصة	(العرض x العمق x الارتفاع)
EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 / ISO-9001:2008					الإنتاج / معيار الاختبار
0.6±0.1 م/ث، 120±20 قدم في الدقيقة					سرعة الهواء
هيكل من البولي بروبيلين الأبيض الملحوم مجهز بسطح عمل من البولي بروبيلين مانع للتسرب ومدمج					مادة
					الخزانة
>62 ديسيل	>60 ديسيل	>54 ديسيل	>52 ديسيل	>52 ديسيل	مستوى الضوضاء
(تم الاختبار على مسافة 20 سم من منضدة العمل، وعلى مسافة 1.2 م فوق سطح الأرض)					
110 / 220 فولت 50/60 هرتز، طور واحد					خيارات مصدر التيار الكهربائي
إضاءة LED صديقة للبيئة، 600-800 LUX >					الإضاءة
مرشح فحم نباتي / مرشح غازات متعدد/ مرشح الهواء من العوائق الدقيقة عالي الفعالية (HEPA)					المرشح

الملحقات

CF-180-A-PP	CF-160A-PP	CF-120-A-PP	CF-090-A-PP	CF-060-A-PP	المواصفات/ الطراز
CF-180-ST	CF-160-ST	CF-120-ST	CF-090-ST	CF-060-ST	الحامل
1800 x 700 x 850 مم	1600 x 700 x 850 مم	1200 x 700 x 850 مم	900 x 700 x 850 مم	600 x 700 x 850 مم	العرض x العمق x الارتفاع
70.86 x 27.56 x 33.46 بوصة	63 x 27.56 x 33.46 بوصة	47.24 x 27.56 x 33.46 بوصة	35.43 x 27.56 x 33.46 بوصة	23.6 x 27.56 x 33.46 بوصة	
CF-180-UV	CF-160-UV	CF-120-UV	CF-090-UV	CF-060-UV	مصباح الأشعة فوق البنفسجية
CF-180-UB	CF-160-UB	CF-120-UB	CF-090-UB	CF-060-UB	طاولة منفصلة

صفحة الويب: www.topairsystems.com البريد الإلكتروني: eran@topairsystems.com

المقر الرئيسي: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA هاتف: +1-718-841-8886 فاكس: +1-718-263-7304

مكتب المبيعات الأوروبي: Evolution Fasteners (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way

Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK هاتف: +44-203-1374012

حقوق النشر لـ © 2015 TopAir Systems. كافة الحقوق محفوظة.