

Aşağı Akış Ünitesi

TopAir'in Aşağı Akış Çalışma İstasyonu, laboratuvar personelini zararlı tozlardan ya da dumanlardan koruyan kanalsız, bağımsız bir ünedir.


Aşağı Akış Çalışma İstasyonu, açık yapısı sayesinde çeşitli laboratuvar materyallerinin yakından incelenmesine imkan sağlarken, aynı zamanda yüksek seviyeli koruma sağlar.

Partiküller ve dumanlar, paslanmaz çelik çalışma yüzeyinden aşağı doğru akar ve kontaminantlar çeşitli filtreler kullanılarak giderilir.

Dumanların ve partiküllerin filtre edilmesinin ardından, temiz hava odaya geri akar.

- Elektrik - 110/220 v 60/50 hz
- Işık- 18 w LED
- Çalışma tezgahı - 304 SUS
- Yapı - Polipropilen
- Filtreler - H14 HEPA/ karbon
- Fanlar - Ebm 310 santrifüj
- Alarm – Yüksek basınç (filtre bloğu)



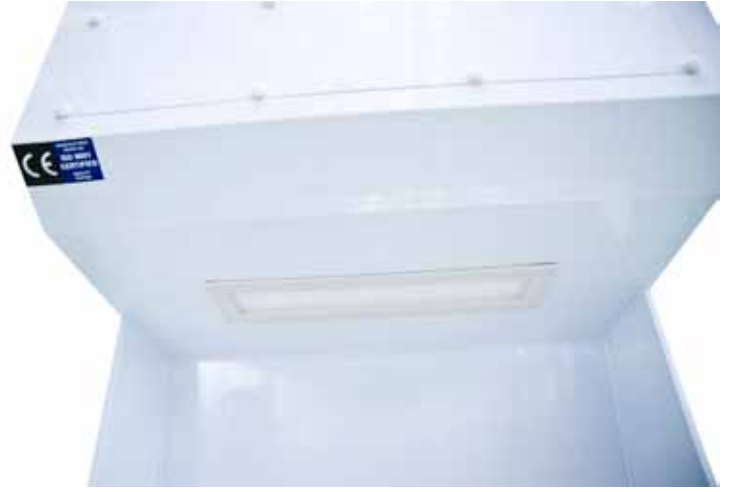

Web: www.topairsystems.com E-posta: sales@topairsystems.com

Ofis - ABD: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA

Tel: +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304 E-posta: sales@topairsystems.com

**Ofis - İngiltere: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,
Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK Tel: +44-203-1374012 E-posta: sales@topairsystems.com**

Telif Hakkı © 2015 TopAir Systems. Tüm Hakları Saklıdır.