

垂直层流装置

TopAir 垂直层流工作台是一款能使实验室人员免受有害粉尘或烟雾危害的独立式无管装置。


此款垂直层流工作台以开放式结构为特色，可对各种实验室材料进行严格检查，同时还为实验室人员提供极高的防护。

微粒或烟雾向下流经不锈钢工作台表面，使用多个过滤器将污染物清除。

随着烟雾和微粒被过滤，洁净空气流回室内。

- 电源选项 - 110/220v 60/50hz
- 照明 - 18w LED
- 工作台材料 - 304 SUS
- 柜子材料 - 聚丙烯
- 过滤器- H14 HEPA过滤器/活性炭过滤器
- 风扇- Ebm 310 离心式风扇
- 警报器 - 高压警报器(过滤块)



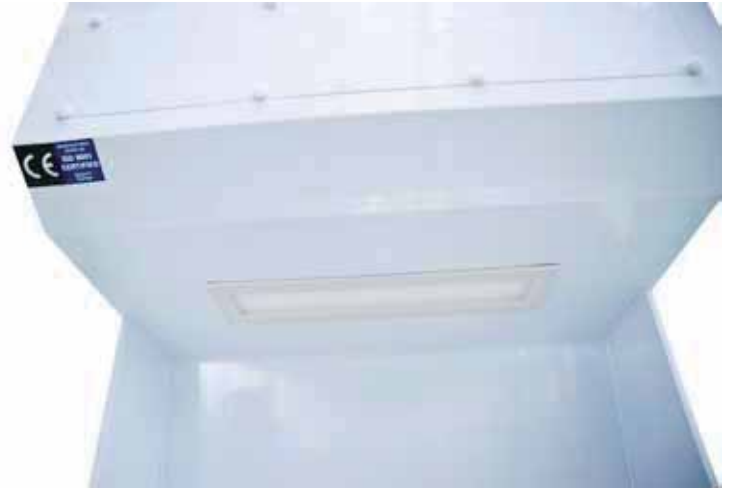

网址: www.topairsystems.com 电子邮箱: eran@topairsystems.com
总公司: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, 美国 电话: +1-855-686-7247 传真: +1-718-263-7304
欧洲销售办公室: Evolution Fasteners (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,
Borehamwood, Herts WD6 1SD, 英国 电话: +44-203-1374012
版权所有 © 2015 TopAir Systems. 保留所有权利。